




# MANUAL DE INSTRUCCIONES

•Manuel d'usage •Instruction manual •Istruzioni per l'uso

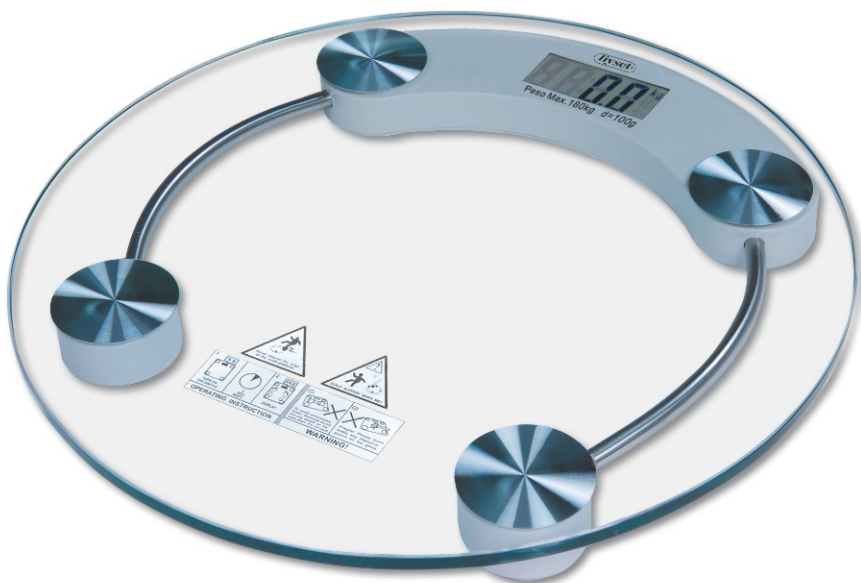

ES

FR

GB

IT

## INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de esta báscula de alta calidad y controlada en todas sus fases de producción.

Leer el manual antes de usar esta báscula para realizar un buen uso de la misma. Contiene la información sobre el uso seguro, las características y la eliminación controlada de la báscula al final de su vida útil. Guarde estas instrucciones para consultas posteriores. Si cede la báscula, entregue también este manual.

## PELIGRO

El aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Esta báscula no es un juguete. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato, ni con las pilas, ni con los plásticos del envoltorio por existir peligro de asfixia.


## ADVERTENCIAS DE USO

- Cuando se ponga sobre el cristal de la báscula, no lo haga con los pies húmedos, ya que podría resbalar.
- Suba a la báscula de forma suave sin golpes para evitar sobre esfuerzos. La báscula tiene un límite de peso admitido y dejándose caer con fuerza, este límite podría ser sobrepasado con riesgo de rotura de los sensores y/o de la báscula, con el riesgo que ello comporta.
- Colocándola en pisos irregulares puede variar las lecturas de peso.
- Utilícela siempre en el mismo lugar.
- No guarde la báscula en posición vertical, podría agotar la batería.
- Lo ideal es pesarse sin ropa ni calzado y en ayunas por la mañana y siempre con el mismo método.
- No coloque la báscula de cristal cerca de fuentes de calor. No coloque objetos sobre la báscula cuando no se utilice.
- Guárdela en un lugar seco y fuera de los rayos del sol
- La báscula de cristal funciona de forma correcta entre 10° y 40° C.

- Una temperatura mayor o menor puede provocar un funcionamiento anómalo.
- No cargue la báscula de cristal con un peso superior a 180 kg. / 400 lb, esto podría estropear la báscula de cristal de forma irreparable.
- No abra ni manipule la báscula, en caso de avería debe ser reparada por servicio técnico especialista.
- Límpiela quitando el polvo con un trapo seco y en caso necesario con un trapo húmedo que no escurra agua. Sin productos químicos.
- No utilice la báscula para fines comerciales. Solo está indicado su uso como báscula en la vivienda.

### INFORMACIÓN SOBRE MANIPULACIÓN DE LAS BATERÍAS

Este aparato utiliza una pila tipo botón de litio modelo CR2032. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de operar con las pilas:

- Cambie la pila cuando indique batería baja 
- Coloque la pila respetando la polaridad
- Utilizar solo el tipo de pila recomendado.
- El cambio de baterías debe ser realizado por un adulto.
- Los niños no deben manipular esta pila botón por peligro de tragarlas.
- En caso de tragarse una pila, solicite ayuda médica urgente.
- No arroje las pilas al fuego.
- No recargue la pila si no es recargable.
- No abra las pilas, ni las suelde, por riesgo de lesiones.
- Cambie las pilas una vez agotadas o viejas.
- Si no utiliza el aparato durante largo tiempo, retire las pilas de la báscula.
- Si la batería ha vertido líquido y/o los contactos están oxidadas, limpie la zona con un tejido seco, si es necesario, limpie los contactos suavemente con una lija muy fina. Utilice guantes protectores.

### SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA



Una vez agotada la batería o después de estar mucho tiempo colocada en su compartimiento, debería comprobar su estado y que no hubiera soltado líquido. En caso necesario sustituir la batería por una de igual características, abriendo la tapa del compartimiento


situado en la parte posterior de la báscula. Para abrir la tapa, utilice las uñas o un destornillador plano fino. Al quitar o poner las pilas, no doblar los contactos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BÁSCULA

Con este producto se suministran: la báscula para el hogar, la batería y el manual de instrucciones.


Las características esenciales de la báscula que ha adquirido son:

- Pantalla LCD 60 x 25 mm.
- Función: encendido y apagado automático.
- Puesta a 0 automática.
- Indicador sobrecarga: 
- Indicador batería baja: 
- Voltaje:  $\text{---}$  3 V.
- Capacidad máxima de carga: 180kg /396lb.
- Conversión kg/lb.
- Peso bascula 1.8 kg. de plástico ABS, plataforma de cristal templado de 6 mm.
- División del peso = 100 g. / 0.2 lb  $\pm$  lb
- Funciona con 1 batería de litio CR2032 / 3 V. incluida
- Equipado con sensor calibrador de precisión.

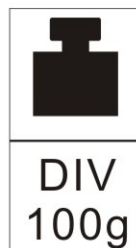

## PARTES DEL PRODUCTO

1. Superficie de pesado. (a)
2. Pantalla LCD. (b)
3. Departamento (inferior) de la batería. (c)

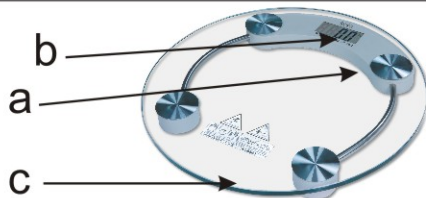

## INDICADOR DE SOBRECARGA

Si se sobrecarga la báscula más de 180 kg. / (396lb), la pantalla mostrará el mensaje de error: "Err"



## INDICADOR DE CAMBIO DE PILA

Cuando las pilas necesiten ser sustituidas, la pantalla mostrará una LO. Abra la tapa de la parte posterior de la báscula, luego retire con cuidado la pila de su compartimiento. No doble los contactos

mientras hace esto o se romperán. Saque la pila e inserte una nueva.

Colóquela sobre el contacto y después cierre la tapa.



Tipo de batería incluida


## INICIO DEL USO DE LA BÁSCULA

La báscula viene sin colocar la batería que aportará energía eléctrica para poder realizar las mediciones del peso.

Lo primero que deberá hacer es colocar la batería en el compartimiento, retirando la tapa e instalando la pila siguiendo las indicaciones de polaridad, observando los signos (+) y (-) de la batería y de la balanza y colocándolos que los (+) de ambos se junten y de igual modo los (-). Cierre la tapa del departamento donde ha colocado la batería.

### Forma de pesado

1. La báscula debe ser colocada en una superficie plana, horizontal y estable. Si la superficie no es estable y plana, las mediciones podrían ser inexactas. (Evite alfombras o superficies blandas).
2. La persona a pesar se debe colocar en el centro de la plataforma de cristal con los dos pies sin mover los mismos y teniendo el cuerpo lo más seguro y estable posible, para que su peso grave sobre los cuatro soportes y la báscula no sea inestable y no resbale sobre ella.
3. Suba a la báscula suavemente y ponga los pies de forma uniforme, sin moverse hasta que salga su peso.
4. Aparecerán en la pantalla unos dígitos (00), cuando estos se estabilicen podrá iniciar su peso
5. La indicación de la pantalla digital LCD, irá variando hasta que quede fija la magnitud del peso.
6. El peso se mostrara en dígitos de la siguiente forma.

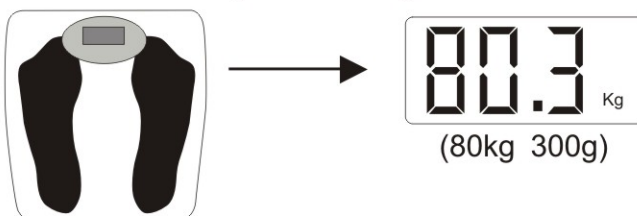

## **Apagado automático**

Cuando se baje de la báscula, esta se apagará automáticamente después de unos 6 segundos. Con este sistema se ahorra energía. Cuando se vuelva a subir para pesar, automáticamente, se pondrá en 0 y realizará la pesada.





**AUTO ON**

Puesta en marcha automática

## **Información facilitada por la pantalla LCD**

La báscula le puede ofrecer diferentes informaciones según el uso que se realice y/o el estado de la misma:

1. En la pantalla aparecen los dígitos **0**: inicio pesada.
2. En la pantalla aparecen los dígitos **Lo** : Batería baja.
3. En la pantalla aparecen los dígitos **Err** : Exceso de peso.



Indicaciones en pantalla

## **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**


La báscula puede resultar resbaladiza si está húmeda. Asegúrese de que está seca antes de usarla. Limpie la báscula con un paño seco y evite que entre agua en su interior. No utilice agentes de limpieza químicos fuertes como el alcohol o el benceno. Mantenga la báscula en posición horizontal. No deje caer la báscula ni salte sobre ella cuando la está utilizando. Evite golpes fuertes y sacudidas puesto que es un aparato de precisión. Su estructura es delicada y sensible a todos los impactos externos. No intente abrirla para repararla. Esto anulará la validez de la garantía.

## **En caso de mal funcionamiento**

Si la báscula falla al encenderla o facilita datos erróneos, realice las siguientes operaciones:


- Compruebe que hay batería.
- Si esta agotada, deberá proceder a sustituirla por una nueva.
- Compruebe que la batería es del tipo CR2032 / 3 V.
- Compruebe que esta colocada correctamente, tal como se indica en este manual.
- Realice una puesta a cero del aparato. Retire la batería durante unos 15 segundos.
- Después vuelva a colocar las pilas y encienda la báscula.
- Si no ha podido resolver el problema, contacte con su distribuidor o servicio técnico para mayor información y seguridad.

## **ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN**

 Para su transporte, nuestras mercancías cuentan con un embalaje optimizado.

Este consiste por principio en materiales no contaminantes que deberían ser entregados como materia prima al servicio local de reciclado de residuos, contenedores específicos ó punto limpio.

 Este producto cumple la Directiva de la UE 2002/96/CE.

 El símbolo del cubo de basura tachado sobre el aparato indica que el producto deberá desecharse separado de los residuos domiciliarios una vez acabada su vida útil. El usuario es el responsable de llevar el aparato a un centro de reciclado de residuos especiales. Su Ayuntamiento o Administración Local le informará sobre posibilidades de deposición para los aparatos en desuso, para una correcta eliminación controlada. Las baterías deberán eliminarse también de la misma forma controlada y no tirarse junto a los residuos domésticos.

Importado por: Zodix Import, S.L.

C/ Repiaix s/n

17451 Sant Feliu de Buixalleu

Girona - España

NIF.: B-55310189

<http://liyset-info.com>



Importado por: Zodix Import, S.L.

C/ Repiaix s/n

17451 Sant Feliu de Buixalleu

Girona - España

NIF.: B-55310189

<http://liyset-info.com>