




**ES** Báscula de baño **FR** Pèse personne  
**GB** Bathroom scale **IT** Bilancia bagno

Pantalla de visualización del peso

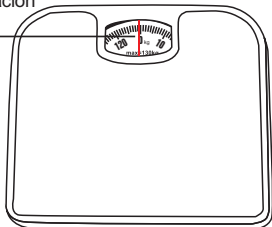


Rueda de puesta a "0"

0~60Kg(130ib)	± 1.2digits
>60~130kg(280ib)	± 2.0digits




No Need Battery

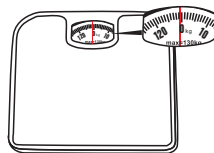

Alinear la aguja en el "0" para una lectura correcta de su peso.



Coloque la báscula en el suelo sobre una superficie sólida como base, para la lectura de peso.

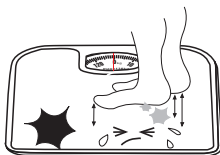


Colocarse en la balanza sin inclinarse hacia delante o hacia atrás, con los pies paralelos, para distribuir el peso en la balanza.




No la deje caer ni le de golpes. Súbase con cuidado



Limpieza con trapo húmedo. No utilice productos químicos

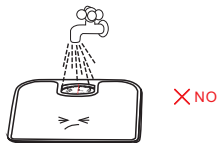

No verter agua sobre la báscula.

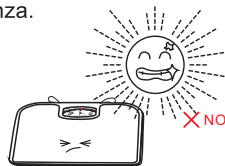

No exponga a la luz solar, ya que puede alcanzar temperaturas muy altas y estropear el mecanismo.